


Patient collection procedure guide

For vaginal swab specimens

Kit includes:

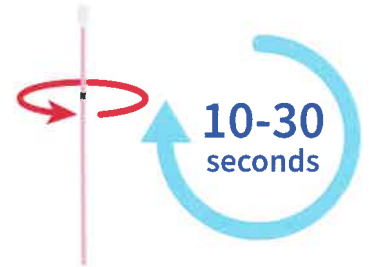


1

Wash hands before starting. If you have any questions about this procedure, please ask your healthcare provider.

Partially open swab package and remove swab. **Do not touch the soft tip or lay the swab down.** If the soft tip is touched, laid down, or dropped, discard and get a new Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit. **Hold swab, placing thumb and forefinger in the middle of swab shaft over score line.**

2

Carefully insert swab into opening of the vagina, about 2 inches (5 cm), and gently **rotate swab for 10 to 30 seconds**. Make sure swab touches the vaginal walls so that moisture is absorbed by the swab. Withdraw swab without touching skin.

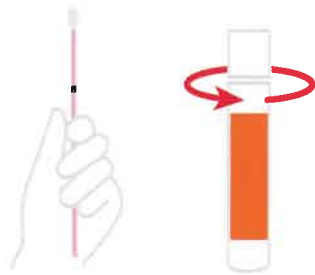


3

While holding swab in your hand, unscrew tube cap. Do not spill tube contents. If tube contents are spilled, request a new Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit.

4

Immediately place swab into transport tube so score line is at top of tube. Align score line with top edge of tube and carefully break swab shaft.

Note: Do NOT insert score line below top edge of vial. Do NOT push swab to bottom of vial.

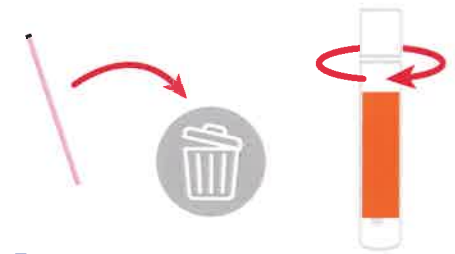

5

Discard top portion of shaft. Tightly screw cap onto tube. Return tube as instructed by your healthcare provider.

To see a video, scan QR code:



or go to: labcorp.com/sti-self-collection-IFU



Instructions authored by Hologic, Inc. Images used with permission from Hologic, Inc. Hologic, Aptima and associated logos are trademarks and/or registered trademarks of Hologic, Inc. and associated companies in the United States and/or other countries.

©2025 Labcorp. All rights reserved.
LI231109_IFU_0325-3

Guía de procedimientos de obtención de muestras del paciente

Para obtención de muestras vaginales

El kit incluye:



1


Lávese las manos antes de comenzar. Si tiene alguna pregunta sobre este procedimiento, consulte a su proveedor de atención médica.

Abra parcialmente el envase del hisopo y retire el hisopo. **No toque la punta blanda ni asiente el hisopo.** Si se toca, se asienta o se cae la punta blanda, deseche y use un nuevo kit de obtención de muestras de hisopado para muestras múltiples Aptima.

Sostenga el hisopo, colocando el pulgar y el dedo índice en el medio de la varilla del hisopo por encima de la línea de marca.

2

Inserte cuidadosamente el hisopo en la abertura de la vagina, aproximadamente 2 pulgadas (5 cm), y rote el hisopo suavemente **durante 10 a 30 segundos.** Asegúrese de que el hisopo toque las paredes vaginales para que absorba la humedad. Retire el hisopo sin tocar la piel.

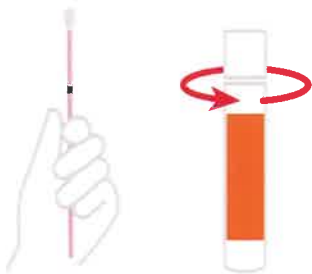


3

Mientras sostiene el hisopo en la mano, desenrosque la tapa del tubo. No derrame el contenido del tubo. Si se derrama el contenido del tubo, solicite un nuevo kit de obtención de muestras de hisopado para pruebas múltiples Aptima.

4

Coloque inmediatamente el hisopo en el tubo de transporte de manera que la línea de marca quede en la parte superior del tubo. Alinee la línea de marca con el borde superior del tubo y quieb্রে cuidadosamente la varilla del hisopo.

Nota: NO inserte la línea de marca debajo del borde superior del vial. NO empuje el hisopo hasta el fondo del vial.

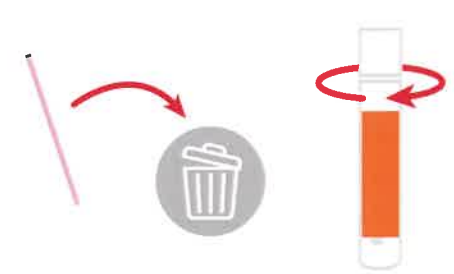

5

Deseche la parte superior de la varilla. Enrosque bien la tapa en el tubo. Devuelva el tubo según las indicaciones del proveedor de atención médica.

Para ver un video,
escanee el código QR:



o visite: labcorp.com/sti-self-collection-IFU